

CAMA HOSPITALARIA

Enterprise® 8000X



Un diseño ingenioso puede ser increíblemente sencillo

La nueva Enterprise 8000X es la cama hospitalaria de uso general más reciente de la gama Enterprise. Su nuevo diseño favorece tanto al cuidador como al paciente en varios aspectos fundamentales: seguridad, eficacia clínica y facilidad de uso.

Una cama de hospital bien diseñada ofrece ventajas importantes, entre las que se incluyen una mayor seguridad, más independencia para el paciente y un mejor rendimiento. También debe ser lo más fácil de usar posible, de manera que el cuidador tenga tiempo de concentrarse en el paciente.

La cama Enterprise 8000X es intuitiva y fácil de usar, gracias a unos símbolos y controles simples y claros, diseñados para facilitar al máximo el manejo de la cama.

Principales características

La cama Enterprise 8000X también dispone de una amplia variedad de accesorios que complementan sus funciones y ofrecen ventajas adicionales para los pacientes y los cuidadores. Si desea más información, póngase en contacto con el representante local de Arjo.



CONTROL DE INFECCIONES

Su diseño de arquitectura abierta facilita el acceso para mejorar los procedimientos de descontaminación. Las placas de la plataforma son ligeras, suaves y fáciles de extraer.



ÁNGULO DEL RESPALDO DE 30 GRADOS

El respaldo se detiene al elevarse hasta un ángulo de 30 grados, de modo que el ajuste del respaldo resulte siempre sencillo y adecuado.




MANTENIMIENTO RÁPIDO "PIT STOP"

Diseñado para un mantenimiento rápido: su accesibilidad permite que una sola persona pueda reemplazar in situ y en cuestión de minutos el actuador, el cuadro de control o la batería.



PANEL DE CONTROL DEL CUIDADOR

Nuevo panel de control con botones de una pulsación, con gráficos y distribución actualizados para un uso intuitivo. Con RCP y bloqueo automático.

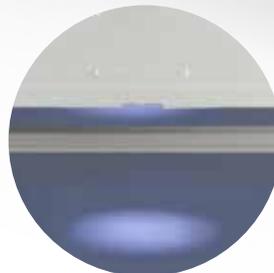

LUZ DEBAJO DE LA CAMA

La zona de salida en los dos lados de la cama está iluminada para ayudar a los pacientes a orientarse cuando salgan de la cama en habitaciones poco iluminadas.





PLATAFORMA DE COLCHÓN CURVADA

El sistema de perfil patentado Bio-Contour mezcla un conjunto excepcional de movimientos de la cama con una plataforma de colchón curva.



POSICIÓN DE SILLA CARDÍACA

El cuidador puede ajustar fácilmente la cama a la posición de silla cardíaca gracias a nuestro sencillo panel de control.



EXTENSIÓN DE CAMA EN 3 PASOS

Las diversas longitudes de la cama se pueden configurar fácilmente en un único bastidor auxiliar, de manera que nos hallamos ante una cama de hospital de longitud variable y fácil de utilizar, que ofrece más opciones y una mayor flexibilidad.



BAJA ALTURA

Una ventaja importante para reducir el riesgo de lesiones por caídas.

Especificaciones del producto

CARACTERÍSTICAS

Respaldo, flexión de rodilla y ajuste de altura con control eléctrico	▪
Inclinación Trendelenburg/ Trendelenburg invertida eléctrica	±12°
Barandillas laterales divididas con controles integrados	▪
Botón de RCP automática y botón de contorno automático	▪
Batería de respaldo	▪
Sistema de perfil Bio-Contour	▪
Posición de silla con un solo botón	▪
Palancas de RCP en ambos lados	▪
Luz bajo la cama	▪
Detención del ángulo del respaldo en 30°	▪
Indicadores del ángulo del respaldo	▪
Extensión de cama incorporada con extensión del somier	▪
Paneles para la cabeza y los pies extraíbles con vinilos de diferentes colores para elegir	▪
Raíles para bolsa de drenaje	▪
Láminas de la plataforma extraíbles fabricadas en plástico (curvadas o planas)	▪
Sistema de dirección y frenado centralizado con cuatro ruedas pivotantes de frenado	▪
Ruedas pivotantes simples de 125 mm	(•)
Ruedas pivotantes simples de 150 mm	(•)
Ruedas pivotantes dobles de 150 mm	(•)
Pedales de freno adicionales en el extremo del cabezal	(•)
Barra de freno de lado a lado (solo en el extremo de los pies)	(•)
Raíles DIN	(•)
Bandeja para sábanas deslizable hacia fuera	(•)
Panel de Control del Cuidador (PCC) en el piecero	(•)
Interruptor de pie de altura variable	(•)
Quinta rueda no motorizada	(•)
Sistema intuitivo de asistencia al movimiento IndiGo	(•)

▪ Estándar (•) Opcional

ESPECIFICACIONES

Longitud total estándar	2350 mm (HOB) y 2300 mm (HOD)
Anchura total	1030 mm
Longitud del colchón estándar	2020 mm
Anchura del colchón	880 mm
Longitud total extendida	2470 mm (HOB) y 2420 mm (HOD)
Longitud del colchón extendido	2140 mm
Longitud total contraída	2240 mm (HOB) y 2190 mm (HOD)
Longitud del colchón contraído	1910 mm
Altura superior (con ruedas de 125 mm)	760 mm
Altura inferior (con ruedas de 125 mm)	320 mm
Longitud del respaldo	850 mm
Longitud del asiento	215 mm
Longitud del tramo de pierna inferior	560 mm
Longitud del tramo de pierna superior	365 mm
Carga de trabajo segura/ peso máximo del paciente	250 kg/185 kg
Inclinación de cabeza hacia abajo	12°
Inclinación de pies hacia abajo	12°
Ángulo del respaldo	62°
Detención del respaldo	30°
Ángulo de la parte superior de la pierna	20°
Ángulo de la parte inferior de la pierna	16°
Protección barrera	IPX4
Protección contra descargas	Clase 1, tipo B
Entrada de alimentación	1,25 A a 230 V CA 50/60 Hz
Entrada de alimentación	2 A a 120 V CA 50/60 Hz
Norma de seguridad	IEC 60601-2-52

Nota: Disponible en configuraciones HOD (cabecero fijado a la base) y HOB (cabecero fijado al somier).

Octubre de 2019 En los equipos y productos suministrados por ArjoHuntleigh, solo deberán usarse piezas diseñadas por ArjoHuntleigh destinadas específicamente a ese fin. Debido a nuestra filosofía de desarrollo continuo, nos reservamos el derecho a modificar los diseños y las especificaciones sin previo aviso. ® y ™ son marcas registradas pertenecientes al grupo de empresas Arjo. © Arjo, 2019

En Arjo, nos comprometemos a mejorar la vida diaria de las personas con movilidad reducida y problemas de salud relacionados con la edad. Con nuestros productos y soluciones que garantizan una movilización ergonómica de los pacientes, higiene personal, desinfección y diagnósticos, así como la eficaz prevención de las úlceras por presión y tromboembolismos venosos, ayudamos a los profesionales que se desarrollan en entornos asistenciales a subir continuamente el nivel de unos cuidados seguros y dignos. Todo lo que hacemos, lo hacemos... with people in mind.

Arjo AB · Hans Michelsengatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
ARJO IBERIA SL · Calle Cabanyes, 1-7, Pol. Ind. Can Salvatella · 08210 Barberá del Vallés (Barcelona) · España · +34 900 921 850

www.arjo.es